

Ein Geschenk des Himmels

Ein Erfahrungsbericht

von *Marion Musenbichler*

Der Gesundheitsstab, um den es hier geht, heißt Powertube® und ist eigentlich ein hoch entwickeltes Therapie-Gerät. Intelligent, geschmeidig und jederzeit einsatzbereit. Wenn dich Schmerzen plagen, liegst du mit ihr goldrichtig, auch wenn du die versilberte Ausführung nutzt. Wenn du bereit bist, deinen Körper zu entgiften, zu entlasten und neu zu beleben, tritt sie in dein Leben. Sie schenkt dir neue Lebensqualität, ein starkes Immunsystem und sieht nebenbei auch noch umwerfend aus. Wie sie das macht? Das wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Körper sind oft sehr belastet, verunreinigt und stark in Mitleidenschaft gezogen. Diese Beeinträchtigungen sind vergleichbar mit dem Rauschen eines Radios, das sich ständig auf Frequenzsuche befindet. Sobald es auf die richtige Frequenz stößt, sind Sprache und Musik klar und rein. Damit der Geist klarer wird und sich der Körper von Verunreinigung und Disharmonien lösen kann, braucht es neben der passenden Frequenz, über die die Powertube® verfügt, auch die richtigen Brennstoffe, ausreichend Bewegung und eine offene und lebensbejahende Haltung.

Wir werden im Gesundheitssektor mit Informationen, Therapie-Möglichkeiten und Geräten förmlich überschwemmt. Was von diesem Überangebot brauchbar, genial, oder überflüssig ist, ist definitiv nicht leicht zu eruieren. Mit allem, was zu uns findet, stehen wir in Resonanz. Aber gehört es in unser Leben?

Dieser Frage musste ich mich nicht stellen. Die Powertube® hat sich sozusagen fast unmerklich in mein Leben geschlichen und ist zu einem festen Bestandteil meines Alltags geworden. Zugegeben, zwischen uns hat es nicht sofort gefunkt. Es war wohl Liebe auf den zweiten Blick. Übrigens, die Powertube® ist eine Sie, vielleicht ist sie deswegen so kraftvoll und stark. Hält man sie erstmals in den Händen, will man sie eigentlich behalten.

Bei Eltern, Schwester und Bekannten haben sich Schmerzen unmerklich verabschiedet. Ich war zwar verblüfft, doch verwundert hat es mich nicht. Die Frequenztherapie ist ja nichts Neues und dass Energie etwas bewirkt, versteht sich von selbst. Die Menschen in meinem Umfeld sind dank Powertube® insgesamt vitaler und widerstandsfähiger geworden. Diese neue Lebensqualität hat mich tief berührt und auch etwas demütig gemacht.

Die Powertube®-Technologie, ihre Frequenzen, ihre rechtlich geschützte geometrische Form, die Metallurgie und einiges mehr wirken sich erneuernd und entgiftend auf die Zellen aus. Wenn sich Strukturen harmonisieren und neu ordnen, muss sich die notwendige Regeneration zwangsläufig einstellen. Schmerzen sind unter anderem das Resultat von Blockaden, Traumata, Disharmonie, Stress, Vergiftung, Infektionen, Wassermangel und falscher Ernährung.

Neben den somatischen Prozessen, die die Selbstheilungskräfte aktivieren und ankurbeln, organisiert sich auch die Innenwelt neu. Die Powertube® ist kein Wunderstab, sondern ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, mit dem wir der psychischen und physischen Verfassung die Möglichkeit schenken, sich von Ballast und Ungleichgewicht zu befreien.

Bei sachgemäßer Anwendung hält die Powertube® ein Leben lang. So gesehen ist der Preis eher gering, wenn man auch noch bedenkt, dass sie in der Schweiz hergestellt wird und von der ganzen Familie genutzt werden kann. Mit ihr kann man wirtschaften und entlastet dabei auch noch das Gesundheitssystem. Vergiss aber nicht, körperliche Beschwerden stets vom Arzt abklären zu lassen. So bist du auf der sicheren Seite.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind ebenso vielfältig wie enorm. So konnte ich in meinem Umfeld viele positive Erfahrungen sammeln:

- Sanfte Entgiftungsprozesse (Verbesserung der Haut und der Verdauung)
- Stärkung des Immunsystems (optimale Vorsorge)
- Wohltuende Entspannungsprozesse
- Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Schmerzen (auch Zahnschmerzen)
- Sofortmaßnahmen beim Anflug physischer und psychischer Symptome
- Stabilisierung des Bluthochdrucks
- Allgemeine Stimmungsaufhellung (Energieschub)
- Tatendrang und Lebensfreude
- Abschwellung von Insektenstichen

Das reich bebilderte *Handbuch QuickZap und Powertube®* enthält viele Infos zur Anwendung und zum Gerät selbst. Informiere dich gut und schau dir die Abbildungen genau an, damit du weißt, was in deinen Zellen passiert und wie du vorgehen kannst. Es ist nicht nur spannend und eindrücklich, sondern nahezu logisch, dass sich eine Veränderung einstellt und ein neues Körpergefühl nicht lange auf sich warten lässt, nachdem du »getubed« hast.

Ich verspreche nichts, sondern appelliere an die Eigenverantwortung. Schmerzen, Krankheit und Verfall sind weder gut noch schlecht, sondern ein natürlicher Aspekt des grobstofflichen Daseins. Finde selbst heraus, wie die Anwendung der Powertube® feinstofflich auf dich einwirkt und in welcher Form sie sich sicht- und wahrnehmbar auf dich auswirkt. Jeder erlebt es anders, weil jeder Mensch einzigartig ist. Trage Sorge zu deinem Körper! Du hast nur den einen. Die Powertube® ist Hilfe zur Selbsthilfe. Nimm dein Leben in die Hand, dann die Powertube®, und du wirst selbst erfahren, wovon ich hier geschrieben habe.

Voller Respekt stehe ich den Gründern der Firma Swissspowertube AG gegenüber und bin dankbar, dass sie sich trotz heftigem Gegenwind nicht vom Kurs abbringen lassen. Durch die seit 1998 unermüdliche Pionierarbeit von El. Ing. HTL Martin Frischknecht ist das Leben für viele Menschen erträglicher und wieder lebenswert geworden. Sein in jungen Jahren jahrelang von Schmerz gezeichneter Leidensweg war wohl der Auslöser für seine Erfindung: ein Geschenk an Mensch und Tier, das wir uns alle zunutze machen können. Vielen, vielen Dank! Die Powertube® ist wie ein Schiff, das die Lebenswogen umsegelt und mir Halt und Zuversicht schenkt. *Also dann: Stab ahoi!*

Medizinisch gesehen:

Mitochondrien sind winzige Gebilde innerhalb einer Zelle. Wir haben 100 Billionen davon. Die Hauptaufgabe der Mitochondrien ist es, den Zellen das Chi – *das energiereichste Molekül Adenosin-Triphosphat, kurz ATP* – zu liefern. Sozusagen sind Mitochondrien unsere Energiefabriken, die Lebensenergie produzieren. Schwache und geschädigte Mitochondrien können den unterschiedlichen Aufgaben, die für die Zellen wichtig sind, nicht mehr nachkommen und produzieren oxidativen Stress. So bilden sich freie Radikale, die gesunde Mitochondrien angreifen und dadurch schwächen. Typische Erkrankungen, die auf eine Schädigung oder Schwächung der Mitochondrien zurückgehen, äußern sich durch massive Schwäche, chronische Ermüdung und Erschöpfung, was zusätzlich ein optimaler Nährboden für allerlei Krankheitsreger ist.


Die Powertube® ordnet den disharmonischen Zustand der molekularen Struktur des Wassers H₂O in allen Zellen. Eine molekulare «Unordnung» kann zu Beschwerden führen. Die Powertube® belebt den Körper, indem sie den Organismus «molekular-geometrisch» harmonisiert und auf diese Weise bestmögliche verfügbare Energie erzeugt. Die 3 Frequenzen der Powertube®, die über die Haut den Körper stimulieren, tragen dazu bei, das Gleichgewicht wiederherzustellen und mobilisieren so die natürlichen Selbstheilungskräfte.

Erfinder und Hersteller: El. Ing. HTL Martin Frischknecht, 3636 Forst, Schweiz

Befreit, entlastet, stärkt.

Ein paar Infos zur Behandlung:

- *VOR und NACH der Behandlung WASSER TRINKEN!*
- *Oft tritt nach der Behandlung Müdigkeit auf. Wenn möglich danach bewegen, damit das Lymphsystem angeregt wird und Giftstoffe abtransportiert werden können!*
- *Weniger ist mehr. Übertreibe es nicht, vor allem am Anfang. Behandlungen vor dem Zubettgehen könnten die Nachtruhe stören, weil die Körperfunktionen angeregt werden.*
- *Bei punktuellen Behandlungen ist immer eine zusätzliche Behandlung mit beiden Stäben optimal (Leiste/Hand über Kreuz, links- und rechtsseitig 5-5-5).*
- *Die Powertube® ist frei von Nebenwirkungen und absolut wohltuend. Bei übermäßiger Anwendung kann z. B. Durchfall (Zeichen für Darmparasiten) auftreten. Diese Reinigung ist ein Zeichen für Entgiftung und Regeneration.*

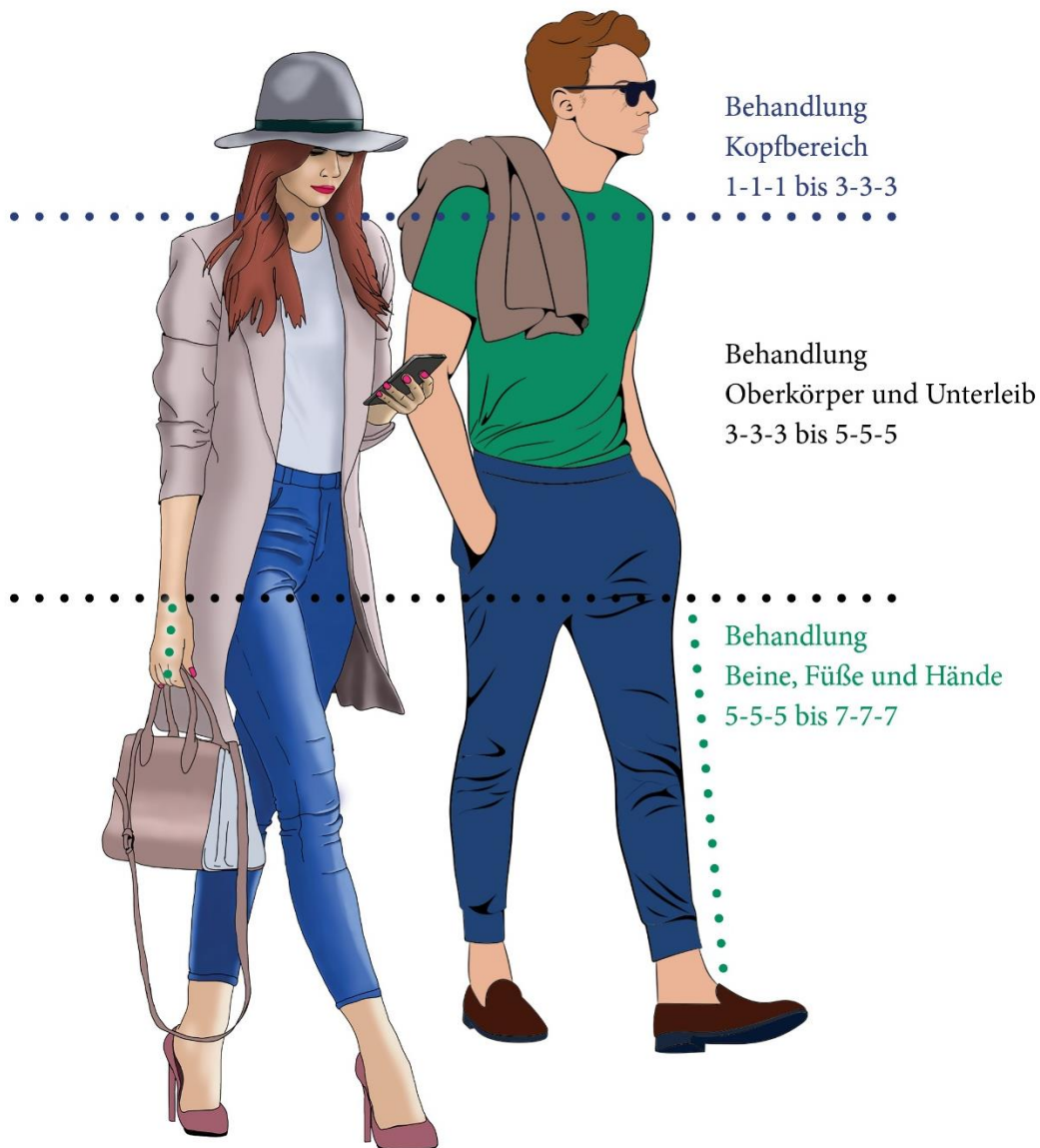

Erfahrungsberichte

Karin Musenbichler, Jg. 1944

Leoben/AT

Powertube Erstanwendung 8/2020

Hüftprobleme/Knieschmerzen

Schmerzstärke/Skala 1-10: 6-9(unterschiedliche Schübe)

Symptome: teilweise immer wiederkehrend starke Schmerzen und Einschränkungen beim Gehen

Wann traten die Beschwerden auf?: bestehen seit vielen Jahren

Diagnose vom Arzt (wortwörtlich): „Ois hin“ (Alles kaputt): „Lassen Sie uns bei den Knien anfangen“, die dazumal auch schmerzten

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: Durchgeführt wurde eine mehrmonatige Spritzenkur bei den Knien, die nur kurz Wirkung zeigte.

Weitere Behelfsmittel: Tägliche Feldenkrais-Lektionen hatten Schmerzlinderung gebracht. Hüft- und Knieschmerzen kamen trotzdem sporadisch wieder.

Powertube®-Behandlung: Fuß/Fuß, Leiste/Hand (abwechselnd)

Anwendung: Täglich 1 x

Dauer: 4-4-4

Reaktionen während der Behandlung: Keine

Ergebnis/Verlauf: Seit die Behandlung durchgeführt wird, sind keine Hüftbeschwerden mehr vorhanden. Knieschmerzen sind seit der Behandlung mit der Powertube® nicht mehr aufgetreten.

Powertube Anwendung 9/2020

Nackenschmerzen

Schmerzstärke/Skala 1-10: 6

Symptome: plötzliche Schmerzen im Nackenstrang, linksseitig

Wann traten die Beschwerden auf?: akut, 16.00 Uhr

Weitere Behelfsmittel: keine

Powertube®-Behandlung: punktuell, direkt auf der schmerzenden Stelle

Anwendung: umgehend 1 x

Dauer: 3-3-3

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: Nach der Behandlung sind keine Schmerzen mehr vorhanden.

Powertube Anwendung 10/2020

Milbenbisse

Schmerzstärke/Skala 1-10: 7-8

Symptome: regelmäßig wiederkehrender starker Juckreiz (mehrmals täglich und nachts), 5 Stellen gerötet und geschwollen

Wann traten die Beschwerden auf?: vor einer Woche

Weitere Behelfsmittel: Euceta Gel mehrmals angewendet, brachte keine Linderung

Powertube®-Behandlung: *punktuell, direkt auf die geschwollenen Stellen (vorerst an 3 Stellen angewandt)*

Anwendung: *1 x an 3 Stellen nach einer Woche und erneut ein paar Tage später bei neuen Bissen*

Dauer: *3-3-3*

Reaktionen während der Behandlung: *spürbare Linderung und Abklingen des starken Juckreizes während der Behandlung*

Ergebnis/Verlauf: *Nach der Behandlung ist kein Juckreiz mehr vorhanden.*

Vermerk: *Die nicht behandelten Stellen juckten weiterhin. Am nächsten Tag restliche Stellen behandelt. Nach der Behandlung dort ebenfalls kein Juckreiz mehr. Stellen waren zwar noch gerötet, der Juckreiz blieb aus (in der Regel auch nach 10 Tagen noch schmerzhafter Juckreiz). **Bei neuen Milbenbissen und sofortiger Anwendung keine Besserung.** 3 Tage danach bereits während der Behandlung Verbesserung spürbar und nach der Behandlung kein Juckreiz mehr vorhanden. Fazit: Hilft nicht sofort!*

Johannes Musenbichler, Jg. 1928

Leoben/AT

Powertube Anwendung 7/2020

Nackebereich

Einschränkung/Skala 1-10: 5-7

Symptome: Einschränkungen bei seitlichen Kopf-Drehbewegungen nach links oder rechts, gewisse Steifheit vorhanden, zusätzliches Dumpfheitsempfinden

Wann traten die Beschwerden auf?: vor vielen Monaten, Dauerzustand

Weitere Behelfsmittel: keine

Powertube®-Behandlung: *punktuell, direkt auf der Halsschlagader, rechts*

Anwendung: *1 x*

Dauer: *3-3-3*

Ergebnis: *Am Morgen nach der Behandlung sind keine beweglichen Einschränkungen, keine Steifheit und auch kein Dumpfheitsempfinden mehr vorhanden.*

Links- und Rechtsdrehung fühlten sich harmonisch an.

Allgemeines Empfinden: *mehr Antrieb und Energie*

Andrea Ellmauer Jg. 1964
Salzburg/AT

Powertube Erstanwendung 7/2020

Schmerzen im Oberarm

Schmerzstärke/Skala 1-10: 5 (bei Belastung)

Symptome: Schmerzen im linken Oberarmmuskel durch Überbelastung, aufgrund des Schmerzes Einschränkungen bei gewissen Bewegungen

Wann traten die Beschwerden auf?: einige Wochen zuvor

Powertube®-Behandlung: *punktuell, direkt auf der schmerzenden Stelle*

Anwendung: 1 x

Dauer: 3-3-3

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: *Nach der Behandlung sind die Schmerzen unverändert. Am nächsten Morgen ist der Oberarm schmerzfrei und im Anschluss auch dauerhaft schmerzfrei geblieben.*

Powertube Anwendung 18.9/2020 und 19.9/2020

Kopfschmerzen

Schmerzstärke/Skala 1-10: 7

Symptome: plötzliche Kopfschmerzen

Wann traten die Beschwerden auf?: akut (18.9.2020)

Powertube®-Behandlung: *punktuell auf dem Powerpunkt 13 am Fuß links*

Anwendung: *umgehend 1 x*

Dauer: 3-3-3

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: *nach der Behandlung keine Schmerzen mehr vorhanden*

Kopfschmerzen

Schmerzstärke/Skala 1-10: 8

Symptome: plötzliche Kopfschmerzen

Wann traten die Beschwerden auf?: akut (19.9.2020)

Powertube®-Behandlung: *punktuell auf dem Powerpunkt 13 am Fuß links*

Anwendung: *umgehend 1 x links, nachdem keine Verbesserung spürbar war, auch die rechte Seite am Powerpunkt 13 behandelt*

Dauer: *3-3-3 links, wenige Minuten später 3-3-3 rechts*

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: *nach der ersten Behandlung (links) keine Verbesserung, nach der zweiten Behandlung (rechts) keine Schmerzen mehr vorhanden*

Gabriella Rieser, Jg. 1964

Hendschiken/CH

Powertube Anwendung 10/2020

Verbrennung

Schmerzstärke/Skala 1-10: 6

Symptome: am Finger außen entlang des Dünndarm-Meridians (Backofen)

Wann traten die Beschwerden auf?: akut, 16.00 Uhr nachmittags

Weitere Behelfsmittel: keine

Powertube®-Behandlung: punktuell, direkt auf der betroffenen Stelle

Anwendung: umgehend 2 x

Dauer: je 1-1-1

Reaktionen während der Behandlung: brennen, 1 Stunde später Wiederholung der Behandlung mit erneutem Brennen

Ergebnis/Verlauf: Um 20.00 Uhr (4 Stunden später) kein Schmerz mehr vorhanden, am nächsten Tag keine Blase, nur ein weißlicher Strich

Friederike Hartberger, Jg. 1954

Reichenau an der Rax/AT

Powertube® Erstanwendung 02/2020

1. Schlaflosigkeit

2. Hautirritationen

3. Brustkarzinom

1. Schmerzstärke- bzw. Belastungsgrenze/Skala 1-10: 10

Symptome: Schlaflosigkeit und Einschlafschwierigkeiten, unruhige Beine, viele Jahre keine Nacht durchgeschlafen, daher tagsüber müde und erschöpft

Wann traten die Beschwerden auf?: 20 Jahre zuvor

Diagnose vom Hausarzt bzw. Hautarzt: Burn-out (Schlaflosigkeit sowie Hautprobleme sind typische Begleiterscheinungen.)

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: keine Veränderungen sicht- oder spürbar

Weitere Behelfsmittel: 5-wöchiger Klinikaufenthalt in Bad Aussee AT (Burn-out). Schlaflosigkeit ist geblieben. Leichte Beruhigung im Körpersystem

2. Schmerzstärke/Skala 1-10: 6-7

Symptome: juckende und nässende Stelle am Hinterkopf beim Haaransatz

Wann traten die Beschwerden auf?: vor einigen Jahren

Diagnose vom Hautarzt: Irritation mit extremer Trockenheit

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: Verschriebene Lotionen und Cremes zeigten keine sicht- oder spürbaren Veränderungen.

Weitere Behelfsmittel: keine

3. **Symptome:** Schmerzen in der Brust (Brustkarzinom)

Schmerzstärke/Skala 1-10: 8

Wann traten die Beschwerden auf?: vor 4-5 Jahren

Diagnose und Behandlungsverlauf: Brustkarzinom rechtsseitig (Januar 2019 OP)

Vorlauf: diverse Untersuchungen wie Skelett-Szintigrafie, Biopsie, CT Thorax/Abdomen, Röntgen von Thorax und Rippen, CT Schädel, EKG, diverse Blutuntersuchungen;

kurz darauf zweite Operation, da bei der ersten OP nicht alles entfernt werden konnte;

anschließend 3,5 Wochen lang jeden Tag (außer Samstag und Sonntag) für Bestrahlungen in der Klinik vom Rettungstransport abgeholt

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: extreme Müdigkeit bis hin zur Erschöpfung, völlige Antriebslosigkeit

Das Gehen fällt nach kurzen Strecken schwer.

schmerzende Narbe, Verhärtungen im Narbenbereich

Der Faden ist beim Entfernungsversuch abgerissen und in der Haut geblieben.

Weitere Behelfsmittel: 3 Wochen REHA in Bad Erlach, Zuckerreduktion und Ernährungsumstellung

energetische und psychische Unterstützung: „Gebete aus der Heiligen Quelle“ von Mario Mantese, „Die heilende Kraft der Symbole“ von Marion Musenbichler

Powertube®-Behandlung: Fuß/Fuß, Hand/Hand, punktuell, direkt auf der betroffenen Stelle, punktuell im Brustbereich direkt auf der Narbe, punktuell im Brust-Wirbelsäulenbereich an der Rückseite der operierten Stelle, punktuell Wangenknochen

Anwendung: 2-3 x täglich abwechselnd

Dauer: 3-3-3 bis 4-4-4

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf:

1. Das Hautproblem im Nackenbereich hat sich unmerklich verabschiedet.
2. Schlafqualität hat sich insgesamt verbessert.
kann wieder durchschlafen, nicht durchschlafen nur noch ab und an der Fall, stellt keine Belastung mehr dar
3. Die Narbe ist weicher und durchlässiger geworden.
keine Schmerzen mehr, wesentlich mehr Energie und Lebensfreude, Vitalität und Tatkraft mehr als je zuvor
Die Beweglichkeit des Armes ist weitaus angenehmer und leichter geworden. Tägliche weite Spaziergänge und Wanderungen (5-8 Stunden) bereiten keine Mühe mehr. Die Lebensqualität hat sich insgesamt enorm verbessert!

Patricia Venetz, Jg. 1963

Chur/CH

Powertube® Erstanwendung 09/2020

Dornwarze

Schmerzstärke/Skala 1-10: 6-8

Symptome: an der Fußsohle vorne beim Gehen (Belastungspunkt), Belastung auf dem Fuß sehr schmerzhaft (wie eine Dornen im Fuß)

Wann traten die Beschwerden auf?: plötzlich (09/2020)

Diagnose vom Arzt: Ärztin sagte wörtlich: „Ein sehr hartnäckiger Virus, das sich wie ein Tumor verhält und nach innen tief ins Fleisch wächst. Es dauert Monate, bis es weg ist.“

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: Verschreibung der Ärztin: Verrumal 2 x täglich (Lösung) zum Pinseln und die tote Haut mit Pinzette ablösen

Weitere Behelfsmittel: täglich 1 Std. Yoga

Powertube®-Behandlung: Fuß/Fuß, Hand/Hand

Anwendung: täglich 3 x

Dauer: 3-3-3

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: nach der ersten Woche Verschlimmerung beim Gehen, die Dornwarze hat sich von innen nach außen herausgearbeitet

Nach 4-wöchiger Behandlung ist die Dornwarze komplett weg!

Fieberblase/Herpes

Rückmeldung vieler Anwender und eigene Erfahrung:

Sobald die Fieberblase spürbar ist, die Stelle direkt punktuell behandeln 1-1-1 oder 2-2-2.

An den nächsten Tagen 1x wiederholen. Kleines Knötchen spürbar vorhanden. Die Entzündung entwickelt sich nicht weiter, der Entzündungsherd wird nach der ersten Behandlung sofort eingedämmt.