

Ein Geschenk des Himmels

Ein Erfahrungsbericht

von *Marion Musenbichler*

Der Gesundheitsstab, um den es hier geht, heißt Powertube® und ist eigentlich ein hoch entwickeltes Therapie-Gerät. Intelligent, geschmeidig und jederzeit einsatzbereit. Wenn dich Schmerzen plagen, liegst du mit ihr goldrichtig, auch wenn du die versilberte Ausführung nutzt. Wenn du deinen Körper entgiften, entlasten und neu beleben möchtest, ist sie die erste Wahl. Sie schenkt dir neue Lebensqualität, ein starkes Immunsystem und sieht nebenbei auch noch umwerfend aus. Wie sie das macht? Das bleibt ihr Geheimnis.

Körper sind oft sehr belastet, verunreinigt und stark in Mitleidenschaft gezogen. Diese Beeinträchtigungen sind vergleichbar mit dem Rauschen eines Radios, das sich ständig auf Frequenzsuche befindet. Sobald es auf die richtige Frequenz stößt, sind Sprache und Musik klar und rein. Damit der Geist klarer wird und sich der Körper von Verunreinigung und Disharmonien lösen kann, benötigt es neben der passenden Frequenz, über die die Powertube® verfügt, auch die richtigen Brennstoffe und ausreichend Bewegung. Eine offene und lebensbejahende Haltung ist nicht nur förderlich, sondern auch ratsam.

Wir werden im Gesundheitssektor mit Informationen, Therapie-Möglichkeiten und Geräten förmlich überschwemmt. Zu eruieren, was in diesem Angebots-Dschungel unbrauchbar, überflüssig, gut oder einfach nur genial ist, ist definitiv nicht leicht. Mit allem, was zu uns findet, stehen wir in Resonanz. Aber gehört es in unser Leben?

Dieser Frage musste ich mich nicht stellen. Die Powertube® hat sich sozusagen fast unmerklich in mein Leben geschlichen und ist zu einem festen Bestandteil meines Alltags geworden. Zugegeben, zwischen uns hat es nicht sofort gefunkt. Es war wohl Liebe auf den zweiten Blick. Übrigens, die Powertube® ist eine Sie, vielleicht ist sie deswegen so kraftvoll und stark. Hält man sie erstmals in den Händen, will man sie eigentlich behalten.

In der Familie und bei Bekannten haben sich die unterschiedlichsten Veränderungen gezeigt und es zieht immer weitere Kreise. Ich war zwar verblüfft, doch verwundert hat es mich nicht. Alles ist möglich, wenn wir uns den Möglichkeiten nicht verschließen. Davon bin ich überzeugt. Viele Menschen erlebe ich gelöster, vitaler, beweglicher und widerstandsfähiger. Diese neue Lebensqualität berührt mich tief berührt und hat mich auch etwas demütig gemacht.

Die Powertube®-Technologie, ihre Frequenzen, ihre rechtlich geschützte geometrische Form, die Metallurgie und noch einiges mehr tragen dazu bei, dass sich Zellen erneuern und entgiften. Wenn sich Strukturen harmonisieren und neu ordnen, muss sich die notwendige Regeneration zwangsläufig einstellen. Schmerzen sind unter anderem das Resultat von Blockaden, Disharmonie, Stress, Vergiftung, Infektionen, Wassermangel und falscher Ernährung.

Neben den somatischen Prozessen, die die Selbstheilungskräfte aktivieren und ankurbeln, organisiert sich auch die Innenwelt neu. **Die Powertube® ist kein Wunderstab, sondern ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, mit dem wir der psychischen und physischen Verfassung die Möglichkeit schenken, sich von Ballast und Ungleichgewicht zu befreien.** Lass dir Zeit! Nach spätestens 2-3 Monaten gibt es dann wohl auch bei dir etwas zu berichten.

Bei sachgemäßer Anwendung hält die Powertube® ein Leben lang. So gesehen ist der Preis eher gering, wenn man auch noch bedenkt, dass sie von der ganzen Familie genutzt werden kann und in der Schweiz hergestellt wird. Mit ihr kann man wirtschaften, entlastet dabei auch noch das Gesundheitssystem. **Vergiss aber nicht, körperliche Beschwerden stets vom Arzt abklären zu lassen. So bist du auf der sicheren Seite.**

Die Anwendungsmöglichkeiten sind ebenso vielfältig wie enorm. So konnte ich in meinem Umfeld viele positive Erfahrungen sammeln:

- Stärkung des Immunsystems (optimale Vorsorge)
- Wohltuende Entspannungsprozesse
- Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Schmerzen (auch Zahnschmerzen)
- Sofortmaßnahmen beim Anflug physischer und psychischer Symptome
- Stabilisierung des Bluthochdrucks
- Allgemeine Stimmungsaufhellung (Energieschub)
- Tatendrang und Lebensfreude
- Abschwellung von Insektenstichen

Ich empfehle das reich bebilderte *Handbuch QuickZap & Powertube®*. Es enthält viele Infos zur Anwendung und zum Gerät selbst. Informiere dich gut, damit du weißt, wie du vorgehen kannst und finde deine eigene Art, das Gerät anzuwenden. Es ist nicht nur spannend und eindrucklich, sondern nahezu logisch, dass sich eine Veränderung einstellt, wenn man weiß, wie sich Schwingungen auf unseren Organismus auswirken.

Ich verspreche nichts, sondern appelliere an die Eigenverantwortung und Vernunft. Schmerzen, Krankheit und Verfall sind weder gut noch schlecht, sondern ein natürlicher Aspekt unseres grobstofflichen Daseins. Finde selbst heraus, wie die Anwendung der Powertube® feinstofflich auf dich einwirkt und in welcher Form sie sich sicht- und wahrnehmbar auf dich auswirkt. Jeder erlebt es anders, weil jeder Mensch einzigartig ist.

Trage Sorge zu deinem Körper! Du hast nur den einen. Die Powertube® ist Hilfe zur Selbsthilfe. Nimm dein Leben in die Hand, dann die Powertube®, und du wirst selbst erfahren, wovon ich hier geschrieben habe.

Voller Respekt stehe ich den Gründern der Firma Swissspowertube AG gegenüber und bin dankbar, dass sie sich trotz heftigem Gegenwind nicht vom Kurs abbringen lassen. Durch die seit 1998 unermüdliche Pionierarbeit von El. Ing. HTL Martin Frischknecht ist das Leben für viele Menschen erträglicher und wieder lebenswert geworden. Sein in jungen Jahren jahrelang von Schmerz gezeichneter Leidensweg war wohl der Auslöser für seine Erfindung: ein Geschenk an Mensch und Tier, das wir uns alle zunutze machen können. Vielen, vielen Dank!

Die Powertube® ist wie ein Schiff, das die Lebenswogen umsegelt und Halt und Zuversicht schenkt. *Also dann: Stab ahoi!*

Medizinisch gesehen:

Mitochondrien sind winzige Gebilde innerhalb einer Zelle. Wir haben 100 Billionen davon. Die Hauptaufgabe der Mitochondrien ist es, den Zellen das Chi – *das energiereichste Molekül Adenosin-Triphosphat, kurz ATP* – zu liefern. Sozusagen sind Mitochondrien unsere Energiefabriken, die Lebensenergie produzieren. Schwache und geschädigte Mitochondrien können den unterschiedlichen Aufgaben, die für die Zellen wichtig sind, nicht mehr nachkommen und produzieren oxidativen Stress. So bilden sich freie Radikale, die gesunde Mitochondrien angreifen und dadurch schwächen. Typische Erkrankungen, die auf eine Schädigung oder Schwächung der Mitochondrien zurückgehen, äußern sich durch massive Schwäche, chronische Ermüdung und Erschöpfung, was zusätzlich ein optimaler Nährboden für allerlei Krankheitsreger ist.


Die Powertube® ordnet den disharmonischen Zustand der molekularen Struktur des Wassers H₂O in allen Zellen. Eine molekulare «Unordnung» kann zu Beschwerden führen. Die Powertube® belebt den Körper, indem sie den Organismus «molekular-geometrisch» harmonisiert und auf diese Weise bestmögliche verfügbare Energie erzeugt. Die 3 Frequenzen der Powertube®, die über die Haut den Körper stimulieren, tragen dazu bei, das Gleichgewicht wiederherzustellen und mobilisieren so die natürlichen Selbstheilungskräfte.

Erfinder und Hersteller: El. Ing. HTL Martin Frischknecht, CH-3636 Forst

Befreit, entlastet, stärkt.

Ein paar Infos zur Behandlung:

- *VOR und NACH der Behandlung WASSER TRINKEN!*
- *Oft tritt nach der Behandlung Müdigkeit auf. Wenn möglich danach bewegen, damit das Lymphsystem angeregt wird und Giftstoffe abtransportiert werden können!*
- *Weniger ist mehr. Übertreibe es nicht, vor allem am Anfang. Behandlungen vor dem Zubettgehen könnten die Nachtruhe stören, weil die Körperfunktionen angeregt werden.*
- *Bei punktuellen Behandlungen ist immer eine zusätzliche Behandlung mit beiden Stäben optimal (Leiste/Hand über Kreuz, links- und rechtsseitig 5-5-5).*
- *Die Powertube® ist frei von Nebenwirkungen und absolut wohltuend. Bei übermäßiger Anwendung kann z. B. Durchfall (Zeichen für Darmparasiten) auftreten. Diese Reinigung ist ein Zeichen für Entgiftung und Regeneration.*

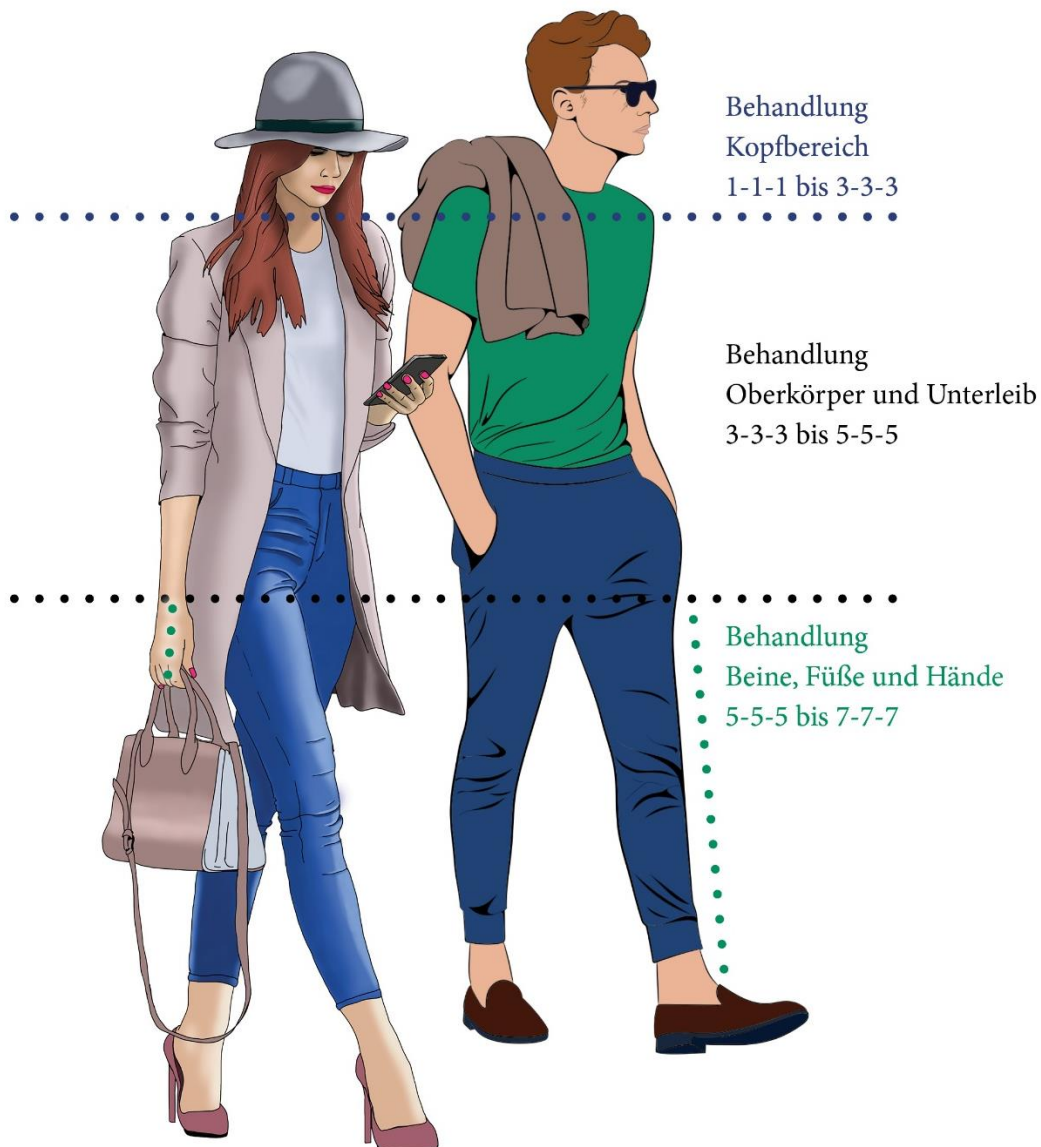

Erfahrungsberichte

Karin Musenbichler, Jg. 1944

Leoben/AT

Powertube Erstanwendung 8/2020

Hüftprobleme/Knieschmerzen

Schmerzstärke/Skala 1-10: 6-9 (unterschiedliche Schübe)

Symptome: teilweise immer wiederkehrend starke Schmerzen und Einschränkungen beim Gehen

Wann traten die Beschwerden auf?: bestehen seit vielen Jahren

Diagnose vom Arzt (wortwörtlich): „Ois hin“ (Alles kaputt): „Lassen Sie uns bei den Knien anfangen“, die dazumal auch schmerzten

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: Durchgeführt wurde eine mehrmonatige Spritzenkur bei den Knien, die nur kurz Wirkung zeigte.

Weitere Behelfsmittel: Tägliche Feldenkrais-Lektionen brachten Schmerzlinderung, Hüft- und Knieschmerzen kamen sporadisch wieder.

Powertube®-Behandlung: Fuß/Fuß, Leiste/Hand (abwechselnd)

Anwendung: Täglich 1 x

Dauer: 4-4-4

Reaktionen während der Behandlung: Keine

Ergebnis/Verlauf: Seit die Behandlung durchgeführt wird, sind keine Hüftbeschwerden mehr vorhanden. Knieschmerzen sind seit der Behandlung mit der Powertube® nicht mehr aufgetreten.

Powertube Anwendung 9/2020

Nackenschmerzen

Schmerzstärke/Skala 1-10: 6

Symptome: plötzliche Schmerzen im Nackenstrang, linksseitig

Wann traten die Beschwerden auf?: akut, 16.00 Uhr

Weitere Behelfsmittel: keine

Powertube®-Behandlung: punktuell, direkt auf der schmerzenden Stelle

Anwendung: umgehend 1 x

Dauer: 3-3-3

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: Nach der Behandlung sind keine Schmerzen mehr vorhanden.

Powertube Anwendung 10/2020

Insektenstiche

Schmerzstärke/Skala 1-10: 7-8

Symptome: regelmäßig wiederkehrender starker Juckreiz (mehrmals täglich und nachts), 5 Stellen gerötet und geschwollen

Wann traten die Beschwerden auf?: vor einer Woche

Weitere Behelfsmittel: Euceta Gel mehrmals angewendet, brachte keine Linderung

Powertube®-Behandlung: *punktuell, direkt auf die geschwollenen Stellen (vorerst an 3 Stellen angewandt)*

Anwendung: *1 x an 3 Stellen nach einer Woche und erneut ein paar Tage später bei neuen Bissen*

Dauer: *3-3-3*

Reaktionen während der Behandlung: *spürbare Linderung und Abklingen des starken Juckreizes während der Behandlung*

Ergebnis/Verlauf: *Nach der Behandlung ist kein Juckreiz mehr vorhanden.*

Vermerk: *Die nicht behandelten Stellen juckten weiterhin. Am nächsten Tag restliche Stellen behandelt. Nach der Behandlung dort ebenfalls kein Juckreiz mehr. Stellen waren zwar noch gerötet, der Juckreiz blieb aus (in der Regel auch nach 10 Tagen noch schmerzhafter Juckreiz). **Bei neuen Stichen und sofortiger Anwendung keine Besserung.** 3 Tage danach bereits während der Behandlung Verbesserung spürbar und nach der Behandlung kein Juckreiz mehr vorhanden. Fazit: Hilft nicht, wenn die Stiche ganz frisch sind!*

Johannes Musenbichler, Jg. 1928

Leoben/AT

Powertube Anwendung 7/2020

Nackebereich

Einschränkung/Skala 1-10: 5-7

Symptome: Einschränkungen bei seitlichen Kopf-Drehbewegungen nach links oder rechts, gewisse Steifheit vorhanden, zusätzliches Dumpfheitsempfinden

Wann traten die Beschwerden auf?: vor vielen Monaten, Dauerzustand

Weitere Behelfsmittel: keine

Powertube®-Behandlung: *punktuell, direkt auf der Halsschlagader, rechts*

Anwendung: *1 x*

Dauer: *3-3-3*

Ergebnis: *Am Morgen nach der Behandlung sind keine beweglichen Einschränkungen, keine Steifheit und auch kein Dumpfheitsempfinden mehr vorhanden. Links- und Rechtsdrehung fühlten sich harmonisch an.*

Allgemeines Empfinden: *mehr Antrieb und Energie*

Andrea Ellmauer Jg. 1964
Salzburg/AT

Powertube Erstanwendung 7/2020

Schmerzen im Oberarm

Schmerzstärke/Skala 1-10: 5 (bei Belastung)

Symptome: Schmerzen im linken Oberarmmuskel durch Überbelastung, aufgrund des Schmerzes Einschränkungen bei gewissen Bewegungen

Wann traten die Beschwerden auf?: einige Wochen zuvor

Powertube®-Behandlung: *punktuell, direkt auf der schmerzenden Stelle*

Anwendung: 1 x

Dauer: 3-3-3

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: *Nach der Behandlung sind die Schmerzen unverändert. Am nächsten Morgen ist der Oberarm schmerzfrei und im Anschluss auch dauerhaft schmerzfrei geblieben.*

Powertube Anwendung 18.9/2020 und 19.9/2020

Kopfschmerzen

Schmerzstärke/Skala 1-10: 7

Symptome: plötzliche Kopfschmerzen

Wann traten die Beschwerden auf?: akut (18.9.2020)

Powertube®-Behandlung: *punktuell auf dem Powerpunkt 13 am Fuß links*

Anwendung: *umgehend 1 x*

Dauer: 3-3-3

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: *nach der Behandlung keine Schmerzen mehr vorhanden*

Kopfschmerzen

Schmerzstärke/Skala 1-10: 8

Symptome: plötzliche Kopfschmerzen

Wann traten die Beschwerden auf?: akut (19.9.2020)

Powertube®-Behandlung: *punktuell auf dem Powerpunkt 13 am Fuß links*

Anwendung: *umgehend 1 x links, nachdem keine Verbesserung spürbar war, auch die rechte Seite am Powerpunkt 13 behandelt*

Dauer: *3-3-3 links, wenige Minuten später 3-3-3 rechts*

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: *nach der ersten Behandlung (links) keine Verbesserung, nach der zweiten Behandlung (rechts) keine Schmerzen mehr vorhanden*

Anmerkung Nov. 2020: Ich fühle durch die Powertube keine außergewöhnlichen Veränderungen, außer Schmerzbefreiung. Vor allem Kopfschmerzen sind nach einer punktuellen Behandlung (Powerpunkt 13/Außenknöchel UND Powerpunkt 1/Innenhand je 3-3-3) nicht mehr vorhanden. Bei sehr, sehr starken Kopfschmerzen muss ich die Behandlung ein zweites Mal oder im Ausnahmefall ein drittes Mal durchführen. Auch Hüftschmerzen konnte ich abwenden. Allein dazu lohnt sich das Gerät. Ob ich durch die täglichen Behandlungen mehr Energie haben, kann ich so nicht sagen.

Gabriella Rieser, Jg. 1962
Hendschiken/CH

Powertube Anwendung 10/2020

Verbrennung

Schmerzstärke/Skala 1-10: 6

Symptome: am Finger außen entlang des Dünndarm-Meridians (Backofen)

Wann traten die Beschwerden auf?: akut, 16.00 Uhr nachmittags

Weitere Behelfsmittel: keine

Powertube®-Behandlung: punktuell, direkt auf der betroffenen Stelle

Anwendung: umgehend 2 x

Dauer: je 1-1-1

Reaktionen während der Behandlung: brennen, 1 Stunde später Wiederholung der Behandlung mit erneutem Brennen

Ergebnis/Verlauf: Um 20.00 Uhr (4 Stunden später) kein Schmerz mehr vorhanden, am nächsten Tag keine Blase, nur ein weißlicher Strich

Powertube Anwendung 11/2020

Auffahrkollision

Schilderung von Gabriella Rieser: 12.11.2020 mit niedriger Geschwindigkeit auf stehendes Auto um 16:50 Uhr, 1 Std danach traten linksseitige diffuse Kopfschmerzen mit Ausstrahlung auf Nacken und linkem Schulterbereich auf.

Behandlung: GB-Punkt 20 mit Akupunkturaufsatz 3-3-3, sowie DÜ 3 3-3-3, ohne Aufsatz GB-Punkt 21 3-3-3, dann einen Durchlauf Hand Hand, alles entspannte sich der diffuse Schmerz löste sich auf. Es war keine Wiederholung erforderlich.

Am Freitag 20.11.2020 traten um 18:00 Uhr akute linksseitige Schmerzen unterhalb des Ohres mit Ausstrahlung zu den Backenzähnen ebenfalls links aus, es fühlte sich wie ein Nervenschmerz an.

Sofort behandelte ich mit der Powertube die Schmerzstelle punktuell 3-3-3 sowie die gegenüberliegende Seite, eine Stunde später nochmals jedoch 1-1-1 am nächsten Tag beruhigte sich der Schmerz langsam alle 2 Std. wiederholte ich dieselbe Behandlung jeweils 1-1-1, am Abend war der Schmerz verfliegen.

Friederike Hartberger, Jg. 1954
Reichenau an der Rax/AT

Powertube® Erstanwendung 02/2020

1. **Schlaflosigkeit**
2. **Hautirritationen**
3. **Brustkarzinom**

1. **Schmerzstärke- bzw. Belastungsgrenze/Skala 1-10: 10**

Symptome: Schlaflosigkeit und Einschlafschwierigkeiten, unruhige Beine, viele Jahre keine Nacht durchgeschlafen, daher tagsüber müde und erschöpft

Wann traten die Beschwerden auf?: 20 Jahre zuvor

Diagnose vom Hausarzt bzw. Hautarzt: Burn-out (Schlaflosigkeit sowie Hautprobleme sind typische Begleiterscheinungen.)

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: keine Veränderungen sicht- oder spürbar

Weitere Behelfsmittel: 5-wöchiger Klinikaufenthalt in Bad Aussee AT (Burn-out). Schlaflosigkeit ist geblieben. Leichte Beruhigung im Körpersystem

2. **Schmerzstärke/Skala 1-10: 6-7**

Symptome: juckende und nässende Stelle am Hinterkopf beim Haaransatz

Wann traten die Beschwerden auf?: vor einigen Jahren

Diagnose vom Hautarzt: Irritation mit extremer Trockenheit

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: Verschriebene Lotionen und Cremes zeigten keine sicht- oder spürbaren Veränderungen.

Weitere Behelfsmittel: keine

3. **Symptome:** Schmerzen in der Brust (Brustkarzinom)

Schmerzstärke/Skala 1-10: 8

Wann traten die Beschwerden auf?: vor 4-5 Jahren

Diagnose und Behandlungsverlauf: Brustkarzinom rechtsseitig (Januar 2019 OP)

Vorlauf: diverse Untersuchungen wie Skelett-Szintigrafie, Biopsie, CT Thorax/Abdomen, Röntgen von Thorax und Rippen, CT Schädel, EKG, diverse Blutuntersuchungen;

kurz darauf zweite Operation, da bei der ersten OP nicht alles entfernt werden konnte;

anschließend 3,5 Wochen lang jeden Tag (außer Samstag und Sonntag) für Bestrahlungen in der Klinik vom Rettungstransport abgeholt

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: extreme Müdigkeit bis hin zur Erschöpfung, völlige Antriebslosigkeit

Das Gehen fällt nach kurzen Strecken schwer.

schmerzende Narbe, Verhärtungen im Narbenbereich

Der Faden ist beim Entfernungsversuch abgerissen und in der Haut geblieben.

Weitere Behelfsmittel: 3 Wochen REHA in Bad Erlach, Ernährungsumstellung und Reduktion von Zucker.

Powertube®-Behandlung: Fuß/Fuß, Hand/Hand, punktuell, direkt auf der betroffenen Stelle, punktuell im Brustbereich direkt auf der Narbe, punktuell im Brust-Wirbelsäulenbereich an der Rückseite der operierten Stelle, punktuell Wangenknochen

Anwendung: 2-3 x täglich abwechselnd

Dauer: 3-3-3 bis 4-4-4

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf:

1. Das Hautproblem im Nackenbereich hat sich unmerklich verabschiedet.
2. Schlafqualität hat sich insgesamt verbessert. Kann wieder besser durchschlafen, Munterwerden stellt keine Belastung mehr dar
3. Die Narbe ist weicher und durchlässiger geworden. Schmerzt nicht mehr.
4. Wesentlich mehr Energie und Lebensfreude, Vitalität und Tatkraft als je zuvor
Die Beweglichkeit des Armes ist weitaus angenehmer und leichter geworden. Tägliche weite Spaziergänge und Wanderungen (5-8 Stunden) mühelos möglich. Lebensqualität hat sich insgesamt enorm verbessert!

Patricia Venetz, Jg. 1963

Chur/CH

Powertube® Erstanwendung 09/2020

Dornwarze

Schmerzstärke/Skala 1-10: 6-8

Symptome: an der Fußsohle vorne beim Gehen (Belastungspunkt), Belastung auf dem Fuß sehr schmerzhaft (wie eine Dorne im Fuß)

Wann traten die Beschwerden auf?: plötzlich (09/2020)

Diagnose vom Arzt: Ärztin sagte wörtlich: „Ein sehr hartnäckiger Virus, das sich wie ein Tumor verhält und nach innen tief ins Fleisch wächst. Es dauert Monate, bis es weg ist.“

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung: Verschreibung der Ärztin: Verrumal 2 x täglich (Lösung) zum Pinseln und die tote Haut mit Pinzette ablösen

Weitere Behelfsmittel: täglich 1 Std. Yoga

Powertube®-Behandlung: Fuß/Fuß, Hand/Hand

Anwendung: täglich 3 x

Dauer: 3-3-3

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: nach der ersten Woche Verschlimmerung beim Gehen, die Dornwarze hat sich von innen nach außen herausgearbeitet

Nach 4-wöchiger Behandlung ist die Dornwarze komplett weg!

Anna Rieser, Jg. 1939

Hendschiken/CH

Powertube Anwendung 10/2020

Knieschmerzen

Schmerzstärke/Skala 1-10: 7

Symptome: Knieschmerzen beim Abbiegen, Hinknien seit 20 Jahren nicht möglich (rechte Seite starke Schmerzen bei Beugebewegungen)

Wann traten die Beschwerden das erste Mal auf?: 2001

Weitere Behelfsmittel:

Powertube®-Behandlung: Fuß/Hand, Leiste/Hand links und rechts abwechseln, Lungenpunkte (AKP LU 1 und 2, Schlüsselbein/Schulter)

Anwendung: täglich

Dauer: je 3-3-3

Reaktionen während der Behandlung: keine

Ergebnis/Verlauf: Nach 10 Wochen Behandlung (jeden 2-3 Tag) schmerzfrei beim Hinknien sowie Beugen. Kann wieder Gymnastik machen.

Nebenerscheinungen:

Haarausfall

Stark rückläufig, kaum noch Haarverlust

Husten

Hartnäckiger Husten der alle Jahre im November wiedergekommen ist, ist dieses Jahr ausgeblieben. Haarausfall hat sich stark verringert, kaum mehr sichtbar

Mehrere Anwender

Fieberblase

Punktuell, direkt auf der Stelle behandeln. Wuchert nach 1-1-1 Behandlung nicht mehr weiter. Entzündungsherd wird direkt nach der Behandlung gestoppt.

Tipp: Herd sucht sich eventuell neue Stellen, deshalb empfehlenswert nach der Behandlung der Stelle rund um die Lippe an mehreren Stellen 1-1-1 behandeln.

Schön, wenn es dir besser geht. Jetzt bist du dran. Bitte halte fest, welche Erfahrungen du mit der Powertube® machen durftest. Wir möchten die Erfahrungsberichte gerne zusammentragen und andere Menschen daran teilhaben lassen. Jeder kann Verantwortung übernehmen und seinem Körper unterstützen. Im Vergleich interessant welche Anwendung und Zeitdauer welche Wirkungen hervorgerufen haben.

Auch deine Erfahrung kann für andere wertvoll sein!

Deshalb maile mir bitte deinen Erfahrungsbericht oder gib ihn an deine persönliche Powertube®-Beraterin weiter. Eine kleine Überraschung wartet auf dich! Vielen, vielen Dank dafür!

Mein Fragebogen

Monat und Jahr: _____

Vorname: _____ Name: _____ Jg.: _____

Land: LI CH A D

Benenne dein Problem (ein Begriff):

Schmerzstärke/Skala 1-10: _____

Symptome: (Wie äußert es sich?):

Wann traten die Beschwerden auf?:

Diagnose vom Arzt (sofern vorhanden):

Reaktionen bei/nach der ärztlichen Behandlung:

Weitere Behelfsmittel:

Powertube®-Behandlung

(z. B. Fuß/Fuß, Leiste Hand über Kreuz, Leiste/Fuß über Kreuz, einseitig, beidseitig, punktuell und/oder Hand/Hand etc.):

Anwendung (wie oft):

Dauer (1-1-1 bis 7-7-7 möglich): _____

Reaktionen während der Behandlung:

Ergebnis/Verlauf:
