


PRODUKTDATENBLATT



INKONTINENZVORLAGEN MIT HÜFTBUND

SENI OPTIMA PLUS

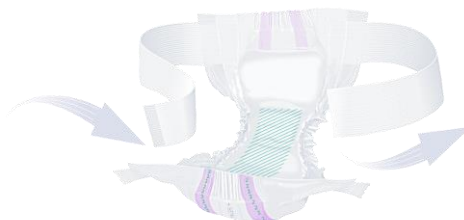

I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzvorlagen mit Hüftbund für Menschen mit schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz nach innen gerichtet. Elastische Tailleneinsätze vorne und hinten. Regulierbarer Hüftbund mit Klettverschluss. Zwei Verschlüsse: wiederverschließbare Klettverschlüsse. Doppelter Nässeindikator in Form von gelben Streifen - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und schwimmt. Die gelben Streifen verändern ihre Farbe in Grün. Atmungsaktive Außenschicht.

II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht weiß mit zwei blauen Streifen, hydrophiles-hydrophobes Vlies, hydrophobes Vlies, EDS-Verteilungsschicht weiß, hygienisches Tissuepapier, elastisches Garn im Schrittbereich, Klettverschlüsse, Hüftbund, elastische Tailleneinsätze, Tinte, Klebstoffe, natürlicher Grüntee- Extrakt.

III. GRÖÖE*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]		Breite [mm]	Breite Saugkern [mm]	Tailenumfang [cm]
		Oben	unten			
Medium	790	340	590	350	220-150-220	70-105
Large	840	400	690	415	245-150-245	80-125
Extra Large	990	420	740	520	300-170-340	105-155

* Abweichung+/- 10 mm

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1)	Retention [g] (NAFC)
Medium	118,7	2600	740
Large	160,7	2900	760

Extra Large	171,0	3500	1200
-------------	-------	------	------

V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Medium	SE-097-ME10-002	10	8	20	Karton
Large	SE-097-LA10-001	10	6	24	Karton
Extra Large	SE-097-XL10-001	10	6	16	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzvorlagen mit Hüftbund sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Agnieszka Tarka,
R&D Specialist

Tomasz Przybylski
Production and
R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 10.10.2017