




Grupo Desfibrilavila
Desfialacant



DESFIBRILAVILA
Equipación de
Emergencia



DESFIALACANT
Equipación de
Emergencia

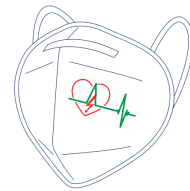

FICHA TÉCNICA MASCARILLA FACIAL TOTTY FFP2 NR

NOMBRE COMERCIAL:

Trade Namber:

TOTTY FFP2

FABRICANTE:

Manufacturer:

Desfibrilavila, S.L.

C/ Cardenal Cisneros, 59

05003 ÁVILA

B05256912

www.desfibrilavila.es

info@desfibrilavila.es

900 272 012

CERTIFICADAS:

Certificates:

EN149:2001+A1:2010 NR TIPO FFP2

ENSAYADO POR:

Rehearsed by:

Laboratorios Aquimisa, S.L.

C/ Hoces del Duratón, 30-34

P.I. El Montalvo II

37008 SALAMANCA

ENSAYADAS EN:

Essayed at:

EN14683:2019:2019 NR TIPO IIR

EN149:2001+A1:2010 NR TIPO FFP2

Producción:

Production:

CERTIFICADO CE POR:

CE Certificate by:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.

C/ Río Tera, 5

05004 ÁVILA

ESPAÑA / SPAIN

ÓRGANO CERTIFICADO:

Body number:

0099

MARCADO:

Marker:

Nombre del fabricante + modelo
EN149:2001+A12010 TIPO FFP2 NR
MADE IN SPAIN – VALID COVID 19



Descripción

Description



Se trata de una media mascarilla fabricada con telas filtrantes de manera limitada, sin válvula de exhalación, compuesta por un cuerpo con forma semicircular en la parte que va hacia la cara y de forma hexagonal en la parte exterior de la máscara. It is a half mask made of filter fabrics in a limited way, without exhalation valve, composed of a semicircular shaped body on the part that goes towards the face and hex shape on the outside of the mask.

La tecnología utilizada en la fabricación del filtro reduce la resistencia en la inhalación y la hace muy cómoda. The technology used in the manufacture of the filter reduces the resistnace in the inhalation and makes it very comfortable.

The technology used in the manufacture of the filter reduces the resistnace in the inhalation and makes it very comfortable.

Diseño ligero que permite la respiración fácil y cómoda. Lightweight desing that allows easy an comfortable breathing.

Lightweight desing that allows easy an comfortable breathing.

Mascarilla plegable cuya forma proporciona adaptabilidad facial ajustada a diversos tamaños faciales. Folding mask whose shape provides facial adaptability adjusted to various facial sizes.

Folding mask whose shape provides facial adaptability adjusted to various facial sizes.

Bandas de fijación para las orejas soldadas a la estructura de la mascarilla. Fixing bands for the ears welded to the mask structure.

Fixing bands for the ears welded to the mask structure.

Libre de partes metálicas en contacto con la cara. Free of metal parts in contact with the face.

Free of metal parts in contact with the face.

Desfibrilavila, S.L.

C/ Río Tera, 5

05004 ÁVILA

B05256912

www.desfibrilavila.es

900 272 012

info@desfibrilavila.es

Desfialacant®


C/ Poeta Zorrilla, 66

03580 ALFAZ DEL PÍ

(Alicante)



Grupo Desfibrilavila
Desfialacant

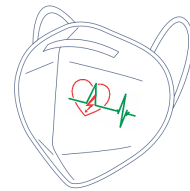

Está dotada de un clip-band para un mayor ajuste nasal.
It is equipped with a clip-band for a greater nasal adjustment.

Composición

Composition

La mascarilla es de un único plegado lineal con el tamaño justo para caber en el bolsillo.
Su composición es la siguiente:

The mask is of a single linear folding with the right size to fit in a pocket. Its composition is as follows:

5 Capas:

5 layers:

Tejido Sin Tejer (TNT)

Unwoven Fabric


1^{ra} Capa: SPUNBOND 50g/m² // **2^o Capa:** SPUNBOND 25g/m² // **3^o Capa:** MELTBLOWN 25g/m² // **4^o Capa:** MELTBLOWN 25g/m² // **5^o Capa:** SPUNBOND 25g/m²

Instrucciones del fabricante

Manufacturer's instructions

Manténgase en un lugar limpio y seco, en su envoltorio hasta su utilización.
Keep in a clean, dry place in its packaging until used.

NO REUTILIZABLE
NON-REUSABLE

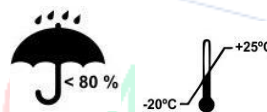

Campo de aplicación

Field of application

FFP2: para partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad. Uso contra polvo de metales no ferrosos, humos metálicos de soldadura, gases y nieblas de distintos materiales como el plomo, aluminio y magnesio. **VALIDA PARA COVID-19**

FFP2: for low and medium toxicity solid and liquid particles. Use against dust from non-ferrous metals, metal welding fumes, gases and mists of various materials such as lead, aluminum and magnesium. **VALID FOR COVID-19**

TIPO IIR: son resistentes a salpicaduras, característica que se testa de acuerdo con lo establecido en la Norma ISO 22609, que permite comprobar su resistencia contra la penetración de sangre sintética en condiciones controladas. **VALIDA PARA COVID-19**

TYPE IIR: they are splash resistant, a feature that is tested in accordance with the provisions of ISO 22609, which allows to check its resistance against synthetic blood penetration under controlled conditions. **VALID FOR COVID-19**

Instrucciones de uso

Instructions for use



Tiempo de uso recomendado: 24 horas (quitársela cada 4 horas)
Recommended usage time: 24 hours (remove every 4 hours)

Almacenar como máximo 2 años desde la fecha de fabricación.
Store a maximum of 2 years from the date of manufacture.

FABRICADA EN ESPAÑA / MADE IN SPAIN

Desfibrilavila, S.L.

C/ Río Tera, 5
05004 ÁVILA
B05256912

www.desfibrilavila.es

900 272 012

info@desfibrilavila.es

Desfialacant®

C/ Poeta Zorrilla, 66
03580 ALFAZ DEL PÍ
(Alicante)