

**NEU**

**JOINSTAR**



## **DER COVID-19 ANTIGEN SPUCKTEST**

**Ein Stück Sicherheit. Bequem & ungefährlich!**

# JO INSTAR

## SENSITIVITÄT & SPEZIFITÄT

SPEICHEL

95.00%<sup>1</sup>

95%CI: 86.08% - 98.96%

Sensitivity

100.00%

95%CI : 88.43% - 100.00%

Specificity


96.67%

95%CI : 90.57% - 99.31%

Accuracy





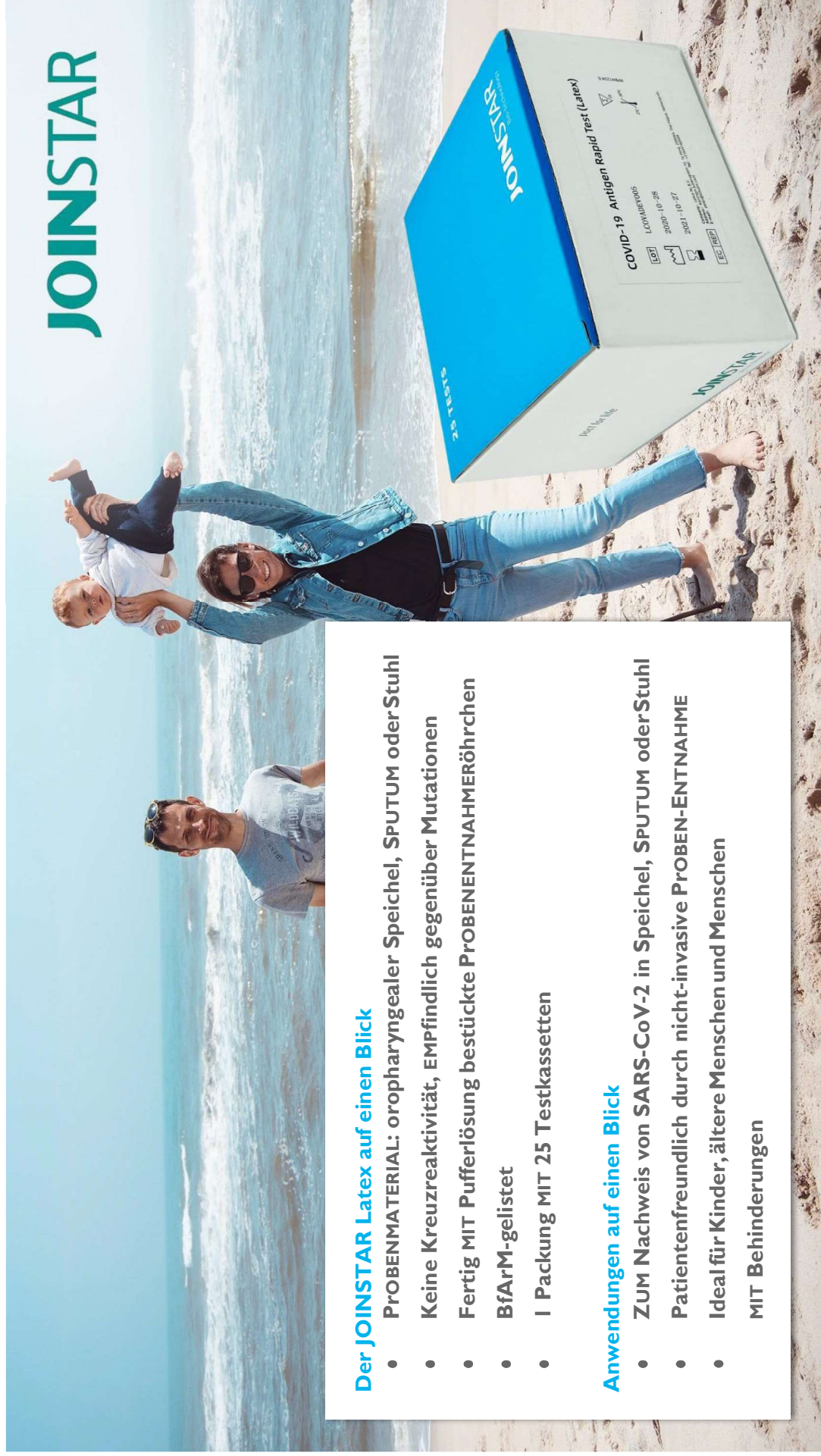

# JOINSTAR

## Der JOINSTAR Latex auf einen Blick

- **PROBENMATERIAL:** oropharyngealer Speichel, SPUTUM oder Stuhl
- Keine Kreuzreaktivität, EMPfindlich gegenüber Mutationen
- Fertig MIT Pufferlösung bestückte PROBENENTNAHMERÖHRCHEN
- BfArM-gelistet
- 1 Packung MIT 25 Testkassetten

## Anwendungen auf einen Blick

- ZUM Nachweis von SARS-CoV-2 in Speichel, SPUTUM oder Stuhl
- Patientenfreundlich durch nicht-invasive PROBEN-ENTNAHME
- Ideal für Kinder, ältere Menschen und Menschen MIT Behinderungen

# JOINSTAR

## Produkt-details

- COVID-19 Antigen-Schnelltest von JOINSTAR
- Testdurchführung MIT oropharyngealem Speichel, SPUTUM oder Stuhl
- Besonders ANGENEHM durch nicht-invasive PROBENNAHME
- Qualitativer Nachweis von SARS-CoV-2
- BfArM-gelistet
- Nachweisgrenze: 0,5ng/mL SARS-COV-2-Spike-Glykoprotein
- EMPfindlich gegenüber verschiedenen Mutationen
- Keine Kreuzreaktivität
- Schnelle Testergebnisse innerhalb von nur 10 - 15 Minuten
- Besonders einfache Testdurchführung durch fertig MIT Pufferlösung bestückte PROBENENTNAHMERÖHRCHEN
- LagerungsTEMPERATUR: 2 - 30°C (Haltbarkeit: 12 Monate ab PRODUKTIONSdatum)
- Testdurchführung nur durch MEDIZINISCHES Fachpersonal
- 1 Packung MIT 25 Testkassetten
- Wie jeder Test vom Rückgaberecht ausgeschlossen



# JOINSTAR



## Lieferumfang

- 25 Testkassetten
- 25 PROBENENTNAHMERÖHRCHEN
- 25 Pipetten
- 25 Einweg-Tüten ZUM Auffangen von PROBENMATERIAL (SPUTUM, Speichel)
- Packungsbeilage



Einweg-Tüten /  
EINMAL-Spuckbecher

**Mit top Werten für diese entspannte Anwendung!**



Sensitivität  
95,00 %

Spezifität  
100,00 %

**Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus**

Liste der Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2.

die Gegenstand des Anspruchs nach § 1 Satz 1 gemäß "Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer COVID-19-Infektion". Alle Daten gemäß Übermittlung des Herstellers, verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den jeweiligen Gebrauchsinformationen.

Weitere Hinweise zur vom BfArM bereitgestellten Liste sowie zu den der Listung und ggfs. auch Streichung von der Liste zugrundeliegenden Kriterien finden Sie auf unserer Webseite

Test-ID	Hersteller		Deutscher/Vertreiber		Europäischer Bevollmächtigter			Sensitivität		Spezifität		Gebrauchs-anweisung			
	Name	Stadt	Land	Name	Name	Stadt	Land	Handelsname des Tests	Testort *	Artikelnummer	%		95%iges Vertrauensintervall	%	95%iges Vertrauensintervall
AT210/...	Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd	Hangzhou	CN			The Hague	NL	Covid-19 Antigen Schnelltest (Latex)	POC (ohne Gerät)	2121	95,00	86,08 - 98,96	100,00	88,43 - 100	<a href="#">Link öffnen</a>


letzte Änderung: 18.12.2020 10:38

\* POC = Point of Care



# JOINSTAR COVID-19 Antigen-Schnelltest (Speichel/Sputum/Stuhl)

# JOINSTAR

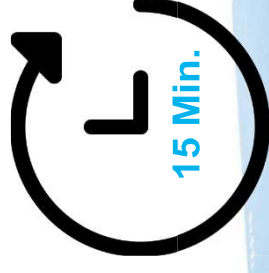

JOINSTAR COVID-19 Antigen-Schnelltest ZUM qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 in oropharyngealem **Speichel**, **Sputum** oder **Stuhl**.

Dieser Schnelltest eignet sich besonders gut für Kinder, ältere Menschen und Menschen **MIT** Behinderungen, da für die Testdurchführung keine **invasive PROBENENTNAHME** notwendig ist.

Die **PROBENENTNAHMERÖHRCHEN** sind bereits fertig **MIT** der richtigen **Menge** an Pufferlösung bestückt, so dass sich die Tests **zeitsparend** und **MIT** geringerem Fehlerpotential durchführen lassen.

Der **JOINSTAR** Antigen-Speicheltest weist keine Kreuzreaktivität auf, ist aber **EMPfindlich** gegenüber Mutationen. **Das Testergebnis** liegt nach **nur 15 Minuten** vor.



Farben der Teströhrchen können von Verpackung zu Verpackung abweichen

EINMAL-Spuckbecher

## Auszug aus der Gebrauchsanweisung

Der COVID-19 Antigen-Schnelltest kann MIT hinteren oropharyngealen Speichelproben, SPUTUM- und Stuhlproben durchgeführt werden.

Für hintere oropharyngeale Speichelproben: waschen Sie Ihre Hände MIT Seife und wasser- oder alkoholbasierten Lösungen. Öffnen Sie den Behälter. Räuspern Sie sich und lösen Sie den Speichel aus DEM Rachen. Spucken Sie ihn in den Behälter (ungefähr 2ML). VERMEIDEN Sie eine KONTAMINATION an der äußeren Oberfläche des Behälters durch den Speichel. Die beste Zeit UM die Probe zu SAMMELN ist nach DEM Aufstehen, bevor der Patient die Zähne geputzt, gegessen oder getrunken hat.

Öffnen Sie das Probenröhrchen und geben Sie ungefähr 200µL der Speichel- oder SPUTUMprobe MIT der Pipette hinein und schütteln Sie es UM alles gut zu VERMISCHEN.

NEHMEN Sie die Testkassette aus DEM Beutel, legen Sie sie auf einen Tisch und schneiden Sie den vorstehenden Teil VOM Deckel des Probenröhrchens ab. Geben Sie dann 3 Tropfen der Probe in die Probenvertiefung und lesen Sie das Resultat nach 15 Minuten ab.

**Komplette Gebrauchsanweisung:**

[https://c-i-v.de/coronajoinstar/antigen\\_latex/GA\\_DE\\_COVID-19AntigenRapidTest\(Latex\).pdf](https://c-i-v.de/coronajoinstar/antigen_latex/GA_DE_COVID-19AntigenRapidTest(Latex).pdf)

# JOINSTAR





# JOINSTAR

## 360° Verpackungsansicht

